


KliniMark™ Clip **PRO**

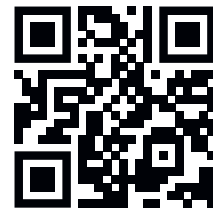

klinimark.com

KliniMark™ Clip PRO Tissue Marker mit Einhand-Applikationssystem


Der KliniMark™ Clip PRO ist ein innovativer Markerclip zur zuverlässigen und dauerhaften Markierung von Weichgewebe. Er wurde speziell für den präoperativen Einsatz sowie zur Markierung und Nachverfolgung von Läsionen vor oder nach Chemo- oder Strahlentherapie entwickelt.

Basierend auf der bewährten KliniMark-Technologie ermöglicht die PRO-Version eine besonders anwenderfreundliche Handhabung durch ein ergonomisches Einhand-Applikationssystem.

Key Feature

FÜR EINHANDBEDIENUNG ENTWICKELT

Präzise Platzierung mit nur einer Hand – die andere bleibt frei für die Ultraschallführung.
Schnell. Sicher. Exakt. Auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

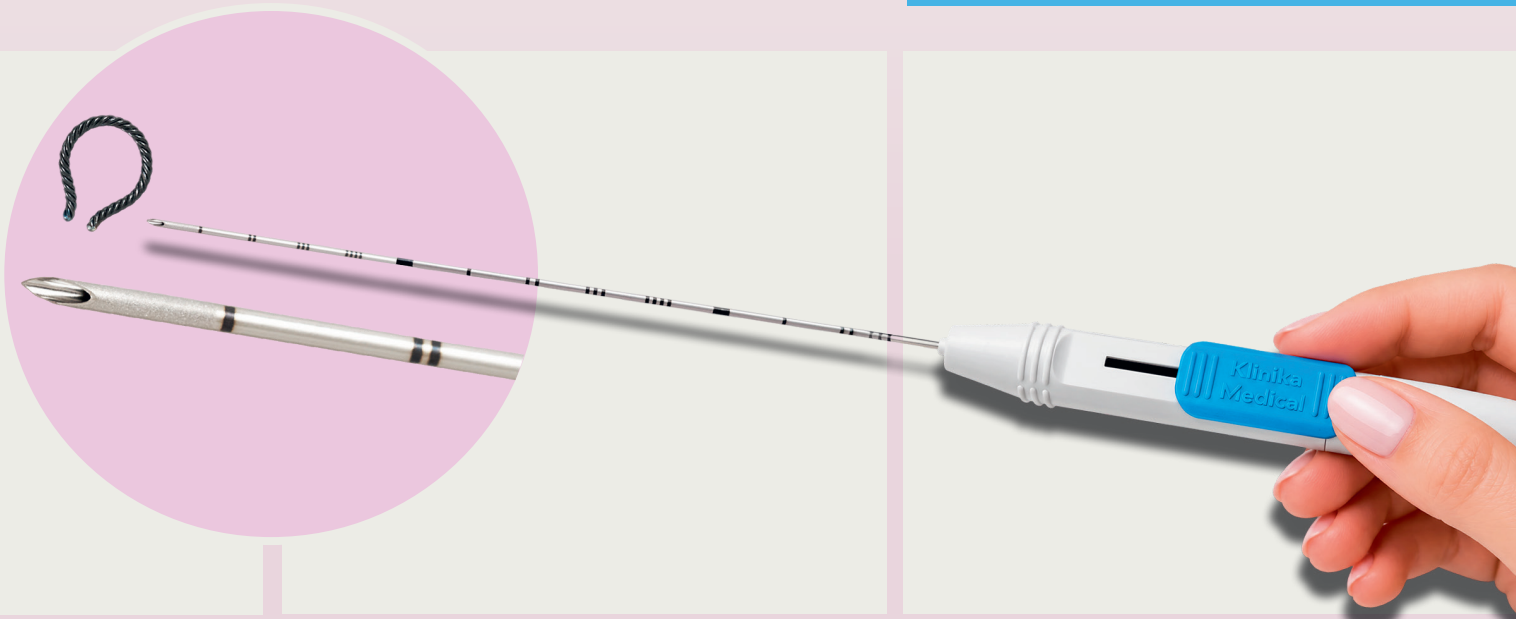

100%
VERFÜGBAR



MADE IN
GERMANY



INT.
STANDARDS



VOR-ORT
SUPPORT



FAMILIEN
GEFÜHRT

**EINFACH
SICHER
INNOVATIV**
klinika-medical.de

➤ Produktvorteile

- **Zuverlässige und permanente Gewebemarkierung**
- **Ergonomisches Einhand-Applikationssystem für einfache Anwendung**

Optimale Sichtbarkeit in allen relevanten Bildgebungsverfahren:

- Ultraschall
- Mammographie (Röntgen)
- MRT
- **Stabiler Halt im Gewebe durch spezielle Omega-Form**
- **Sanfte und kontrollierte Platzierung für hohen Anwenderkomfort**
- **Clip ist MRI-kompatibel – Clip kann bis zur operativen Entfernung im Gewebe verbleiben**
- **Biokompatibles Material (implantatgeeignetes Nitinol)**

➤ Indikationen

- Markierung von Läsionen oder Tumoren vor oder nach Chemo- bzw. Strahlentherapie
- Kennzeichnung von Biopsiestellen
- Markierung von resezierten Tumorarealen

Präoperative Gewebemarkierung zur exakten Lokalisation für:


- chirurgische Eingriffe
- gezielte Strahlentherapie

➤ Anwendung

- KliniMark™ Clip PRO wird perkutan über eine Applikationskanüle eingebracht und im Zielgewebe freigesetzt.
- Durch seine dreidimensionale Struktur bietet der Marker eine hervorragende Orientierung in der Bildgebung und unterstützt eine präzise Therapieplanung.

➤ KliniMark™ Clip PRO

Design	KliniMark™ Clip PRO sterile steel cannula with Nitinol marker
Artikel Nr.	205880900C
Durchmesser (Gauge)	18
Länge Kanüle (mm)	155
Material Kanüle	Steel
Größe Clip (mm)	4,9 x 2,1
Durchmesser Clip (mm)	4,5
Material Clip	Nitinol
VE	2x5
Sterilisationsmethode	EO/ETO

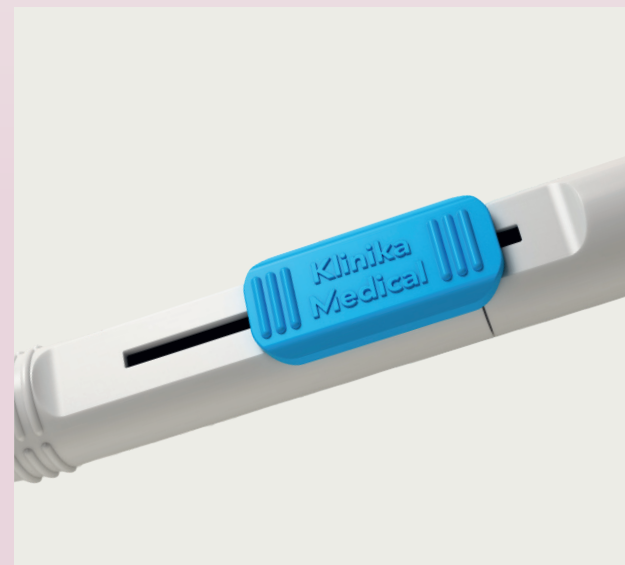

Hinweise

➤ KliniMark™ Clip PRO

- Steriles Einmalprodukt – nur zur einmaligen Anwendung
- Der Marker ist nicht resorbierbar und verbleibt bis zur geplanten Entfernung im Gewebe
- Enthält Nickel (Nitinol) – Anwendung bei bekannter Nickelallergie nur nach ärztlicher Abklärung



klinimark.com